

検査内容変更のお知らせ

(管理番号: 24-0053)
2024年10月 C

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび下記測定機器におきまして、経年劣化に伴い同一メーカーの後継機に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 対象項目

項目コード	検査項目	項目コード	検査項目
130	CK-MB	473	梅毒定性TP抗体
189	尿中NAG ^{※2}	482	穿刺液)CH50
239	P型 アミラーゼ [°]	483	梅毒定量RPR
240	尿)P型 アミラーゼ [°]	686	HbA1c (NGSP)
242	尿)アミラーゼ	741	尿蛋白 ^{※2}
255	尿ALB・CRE補正 ^{※2}	742	尿グルコース ^{※1※2}
261	グルコース ^{※1}	761	穿刺液)グルコース
379	尿)クレアチニン ^{※2}	768	穿刺液)アミラーゼ [°]
441	風疹抗体 (LA)	781	髄液)総蛋白
449	C3	782	髄液)グルコース
450	C4	995	髄液)アルブミン
457	CH50	9252	KL-6
470	梅毒定性RPR		

※1: 負荷コードも同様に変更させていただきます。

※2: 蓄尿につきましても同様に変更させていただきます。

■ 変更内容

	新	旧
機器メーカー	日本電子株式会社	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM9130


・基準値、所要日数など検査要項の変更はございません。

■ 变更日期


2024(R6)年11月25日(月)ご依頼分より

【新旧測定機器の相関図】


CK-MB

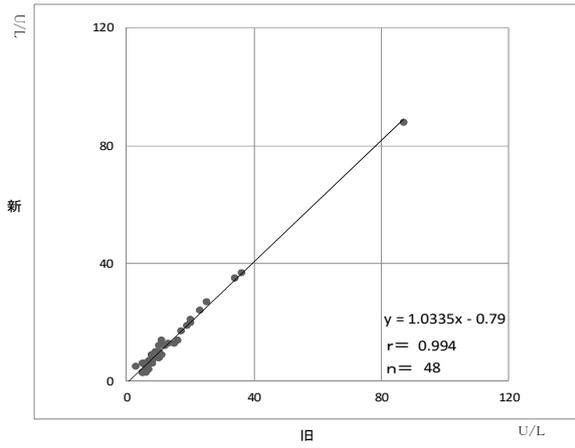


尿中NAG

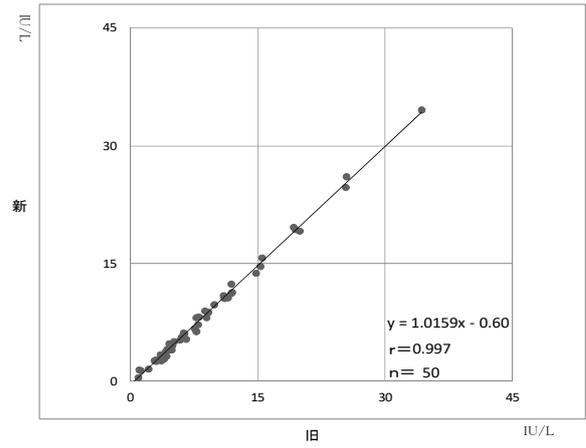


P型アミラーゼ

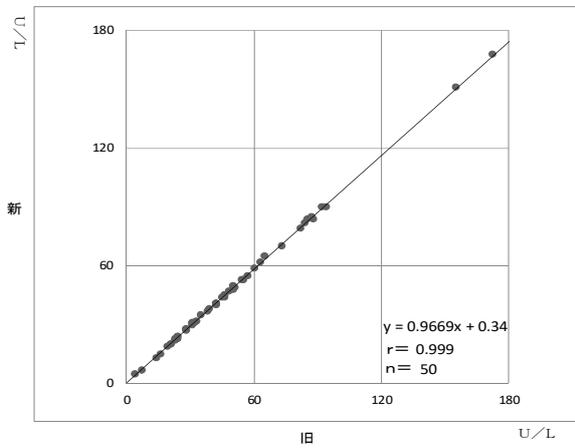


尿)アミラーゼ

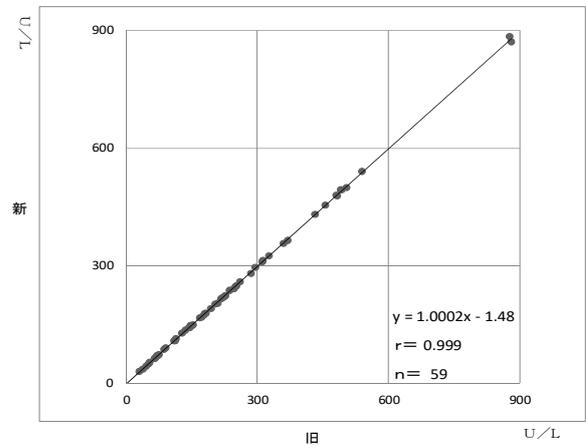


尿ALB・CRE補正

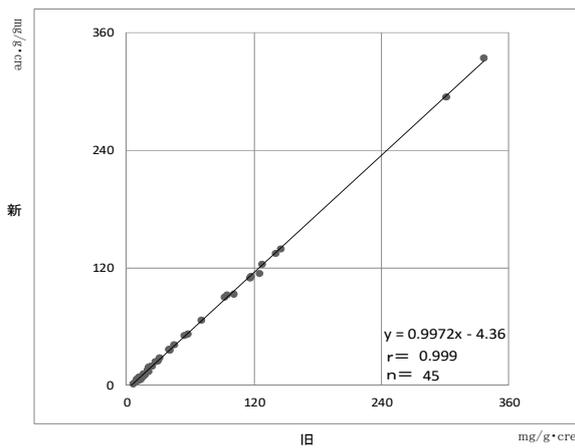


グルコース

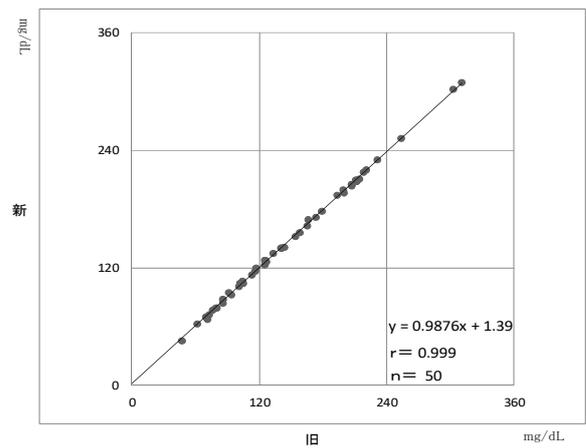


尿)クレアチニン

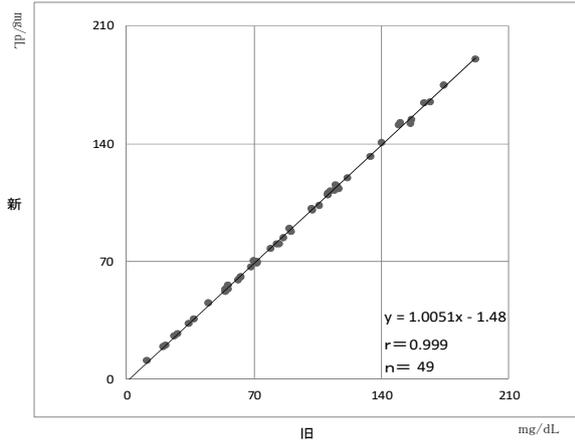


風疹抗体(LA)

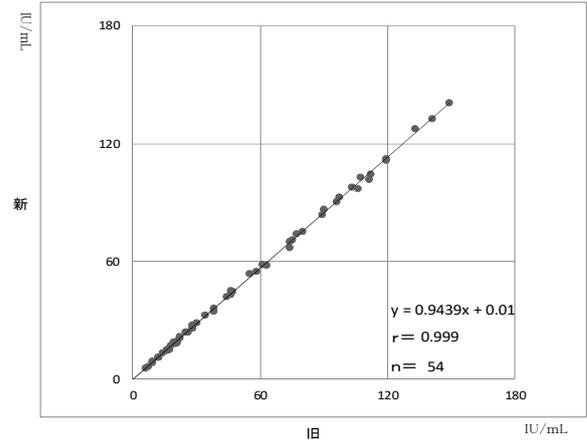


C3

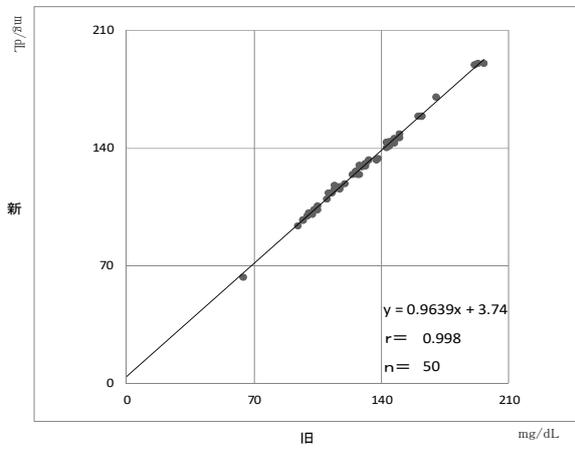


C4

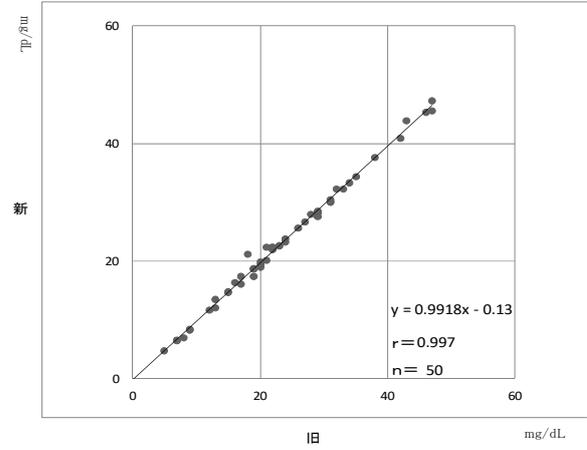

CH50

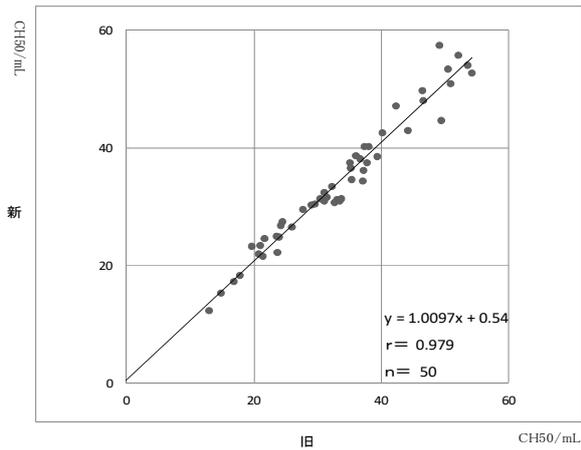

梅毒定量RPR

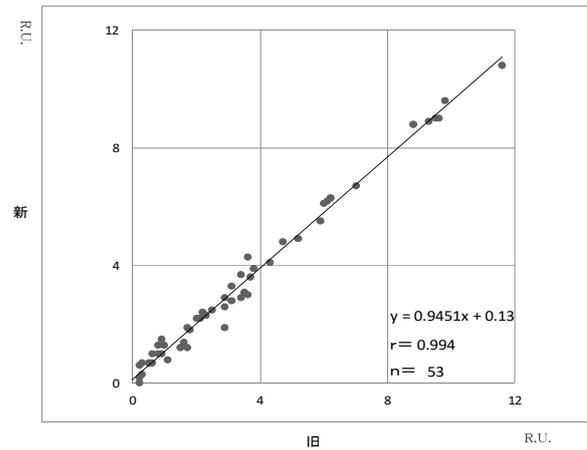

● 梅毒定性RPR判定一致率

		旧		
		陽性	陰性	合計
新	陽性	38	1	39
	陰性	1	10	11
	合計	39	11	50


陽性一致率: 97. 4%(38/39)
陰性一致率: 90. 9%(10/11)
判定一致率: 96. 0%(48/50)

● 梅毒定性TP抗体判定一致率


		旧		
		陽性	陰性	合計
新	陽性	37	2	39
	陰性	0	11	11
	合計	37	13	50

陽性一致率: 94. 9%(37/39)
陰性一致率: 100. 0%(11/11)
判定一致率: 96. 0%(48/50)


HbA1c(NGSP)

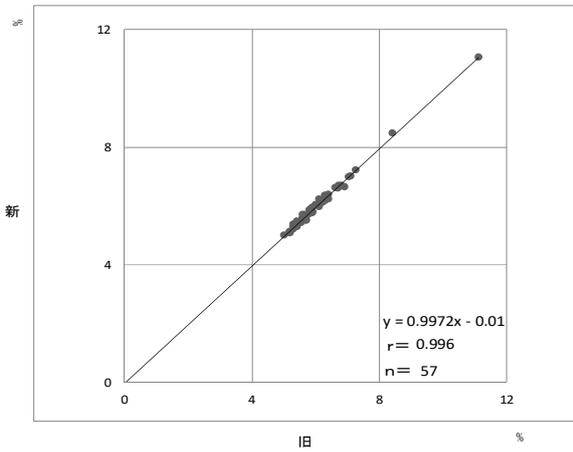

尿蛋白

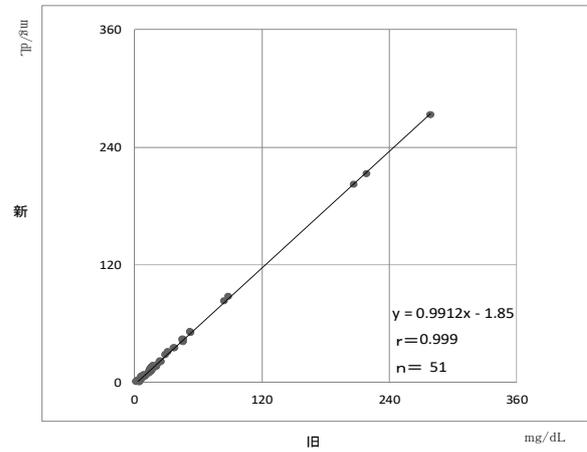

KL-6

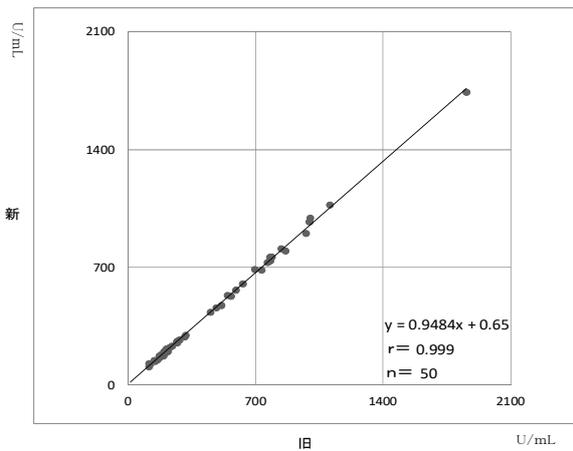

(自社検討資料)